


KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

StarLink Masa Mikrofonu

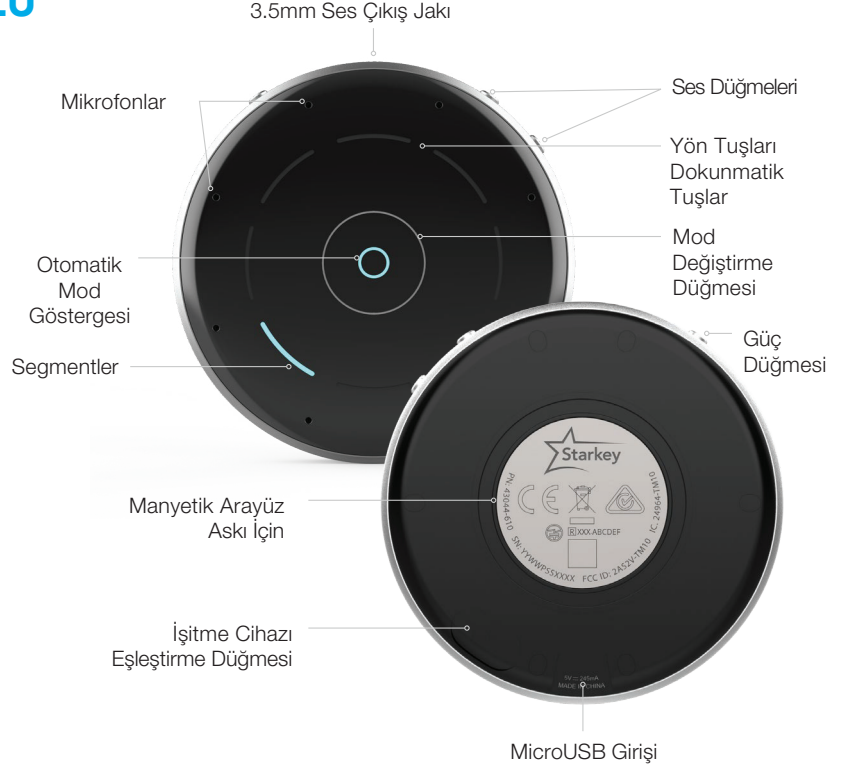


Eşleştirme

2.4 GHz Masa Mikrofonu, Neuro Processor ve Thrive platformlarında uyumlu 2.4 GHz işitme cihazlarıyla etkileşim kurabilmesi için eşleştirilmelidir. Eşleştirme bir kez yapılır, ardından işitme cihazları ve Masa Mikrofonu birbirini otomatik olarak tanır. Masa Mikrofonu, fitting yazılımı içinde veya fitting yazılımı dışında eşleştirilebilir.

Pro Fit için eşleştirme


- 1 Pro Fit uygulaması başlatın ve işitme cihazlarını bağlayın.
- 2 Pro Fit'teki **Hazırlık Oturumundan** veya **Açılır Menüden Aksesuarları** seçin.
- 3 Güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutarak Masa Mikrofonunun açık olduğundan emin olun parantezler yeşil yanana kadar bekleyin.
- 4 İşitme cihazlarını Masa Mikrofonunun 15 cm yakınına yerleştirin.
- 5 Cihazın altındaki İşitme Cihazı Eşleştirme düğmesine iki saniye basılı tutarak Masa Mikrofonunu eşleştirme moduna alın. Cihazın üstündeki yanıp sönen mavi parantezler, Masa Mikrofonunun eşleştirme modunda olduğunu gösterir.
- 6 İşitme cihazlarını eşleştirme moduna almak için seçin. +
- 7 Masa Mikrofonu Aksesuarlar ekranında görüntülendiğinde eşleştirme başarılıdır.
- 8 Masa Mikrofonunun üzerindeki açılır menüyü kullanarak Akış sırasında **İşitme Cihazı Mikrofonunu** ayarlayın.
- 9 Masa Mikrofonuna altındaki açılır menüyü kullanarak akış sesini optimize edin. Seçenekler şunlardır: Eşitleme (varsayılan), Tiz Artırma, Bas Artırma ve Genel Artırma.
- 10 Gerekirse eşleştirme talimatları için **eşleştirme bilgilerini** seçin.

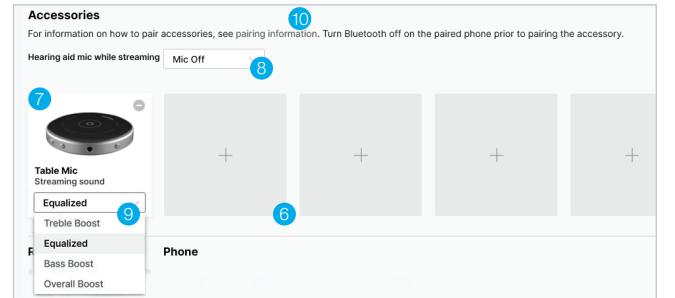

Eşleştirme (Devamı)


Inspire X için eşleştirme

- 1 Inspire X'i başlatın, işitme cihazlarını bağlayın ve algılayın.
- 2 Sol gezinme çubuğundan **Aksesuarları**'ı seçin.
- 3 Masa Mikrofonunun açık olduğundan emin olun güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutarak parantezler yeşil yanana kadar bekleyin.
- 4 İşitme cihazlarını Masa Mikrofonunun altı inç yakınına yerleştirin.
- 5 Masa Mikrofonunu eşleştirme moduna almak için cihazın altındaki İşitme Cihazı Eşleştirme düğmesine iki saniye basılı tutun. Cihazın üstündeki yanıp sönen mavi parantezler, Masa Mikrofonunun eşleştirme modunda olduğunu gösterir.
- 6 İşitme cihazlarını eşleştirme moduna almak için **Eşleştir**'i seçin.
- 7 Masa Mikrofonu Aksesuarlar ekranında görüldüğünde eşleştirme başarılıdır.
- 8 Masa Mikrofonunun altındaki açılır menüyü kullanarak **Akış Sırasında İşitme Cihazı Mikrofonunu** ayarlayın.
- 9 Gerekirse eşleştirme talimatları için bilgi simgesini seçin.

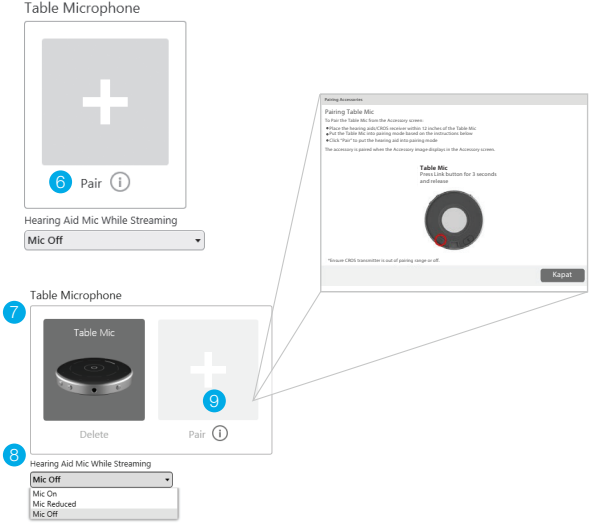


Yazılım dışında eşleştirme

- 1 İşitme cihazlarıyla önceden eşleştirilmiş olan tüm akıllı telefonları veya diğer aksesuarları kapatın.
- 2 Eşleştirme moduna almak için işitme cihazlarını kapatın ve ardından tekrar açın.
- 3 İşitme cihazlarını Masa Mikrofonunun altı inç (yaklaşık 15 cm) yakınına yerleştirin.
- 4 Cihazın altındaki İşitme Cihazı Eşleştirme düğmesine iki saniye basarak Masa Mikrofonunu eşleştirme moduna alın. Cihazın üstündeki yanıp sönen mavi parantezler, Masa Mikrofonunun eşleştirme modunda olduğunu gösterir (A).
- 5 Yeşil bir parantez, eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir (B). Bir parantez sol işitme cihazı, bir parantez de sağ işitme cihazı içindir.

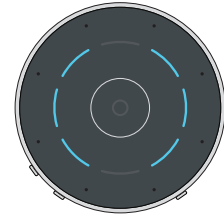


(A) İşitme cihazları aranıyor

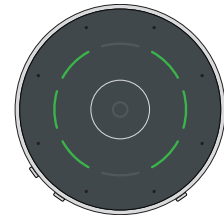

(B) İşitme cihazı eşleştirilmesi başarılı

Nasıl Çalışır?


Masaüstü Mikrofon, kullanıcının toplantı gibi birden fazla konuşmacının bulunduğu ortamlarda ana konuşmacıya odaklanmasını sağlayarak gürültülü ortamlarda dinlemeyi iyileştirmek için tasarlanmıştır. Masaüstü Mikrofon ayrıca vücuda takılan uzaktan mikrofon veya TV yayıncısı olarak da işlev görür. Masaüstü Mikrofon, kablolu kulaklıklarla birlikte kullanıldığında, işitme cihazı kullanmayan veya normal işitme yetisine sahip dinleyiciler için de gürültülü ortamlarda dinleme avantajı sağlayabilir.

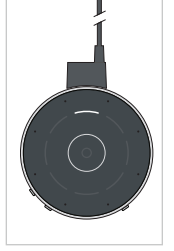

Kullanım Modları

Otomatik Mod:

Mod Değiştirme Düğmesine (ortada) basın. Otomatik Mod etkinleştirildiğinde O simgesi mavi renkte yanacaktır. Otomatik Mod Göstergesi yandığında, Masa Mikrofonu otomatik olarak ana hoparlörü takip eder. Mavi segment aktif dinleme yönünü gösterir.

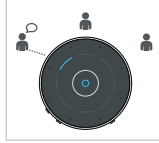


Manuel Mod: Tek Yönlü

- Belirli bir yöne odaklanmak için herhangi bir bölüme dokununuz.
- Farklı bir yöne odaklanmak için başka bir bölüme dokununuz.



Manuel Mod: Çift Yönlü

- İkinci bir bölüme dokununuz ve bir saniye basılı tutarak ikinci bir yöne odaklanınız.
- Başka bir bölüme dokunarak farklı bir yöne odaklanınız.

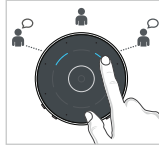


Çevresel Ses Modu: Sessiz bir ortamda birden fazla hoparlörden ses dinlemek için tasarlanmıştır.

- Otomatik Modu devre dışı bırakmak ve Masa Mikrofonunu Çevresel Ses Moduna geçirmek için Mod Değiştirme Düğmesine dokununuz. Tüm mavi bölümler, her yönden ses dinlemeyi gösterir.



Uzaktan Mikrofon:


Masa Mikrofonu, boyuna uzanan bir kordonla uzaktan mikrofon olarak kullanılabilir. Masa Mikrofonu, oynatılmasının ağzından sekiz inç (yaklaşık 20 cm) mesafede olmalıdır.

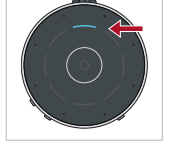

- Manyetik askıları Masa Mikrofonunun konuşması yapın. Askının düzgün bir şekilde yapıldığından emin olun.
- Masa Mikrofonu tarafından oynatıldığında, üst gösterge üç saniye boyunca yanacaktır.

TV/Ses Akışı:

Masa Mikrofonu, 3,5 mm ses çıkış jakı boyunca bağlandığında TV'den, MP3 çalarlardan ve daha fazlasından ses kaydı yapmak için kullanılabilir.

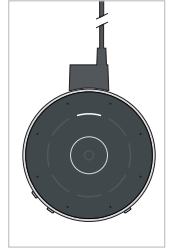

- Ses çıkışının kesilmesi mikroUSB jakına takın.
- Ses çıkışının kesilmesinin 3.5 mm ses fişini ses çıkış jakına takın.


Kullanım

Masaüstü Mikrofon, Neuro Processor veya Thrive platformunda uyumlu 2.4 GHz iletme cihazlarından bir çiftle eşleştirilebilir. En iyi performans için, Masaüstü Mikrofonun ses ve güç düğmelerinin size dönük olduğundan emin olun.

- Masa Mikrofonu açıldığında ses akış otomatik olarak başlayacaktır. Masa Mikrofonu kapatıldığında ses akışı duracaktır.
- Ayrıca, ses akışı çeşitli şekillerde başlatılabilir/durdurulabilir:
 - İşitme Cihazı Kullanıcı Kontrolü: Basılı Tutma veya Çift Dokunma
 - Uzaktan Kumanda: Favori Düğmesi
 - Thrive İşitme Kontrol Uygulaması
- Akış ses seviyesini ayarlamak için Masa Mikrofonundaki + ve - düğmelerine basın. Ses seviyesi artırıldığında beyaz üst segment yanıp söner ve ses seviyesi azaltıldığında beyaz alt segment yanıp söner.
- Masa Mikrofonunun çalışma menzili 30 feet'e (10 metre) kadardır.
- Masa Mikrofonu tek bir tam şarjla 12 saate kadar akış sağlayabilir.
- Masa Mikrofonu yaklaşık iki saatte tam şarj olur.

Pil Durum Göstergeleri

- (A) Yeşil segmentler** pil şarj seviyesini gösterir. Her segment bir saati temsil eder. Yanıp sönen yeşil bir segment mevcut seviyeyi gösterir.
- (B) Turuncu** segmentler iki saatten az pil ömrünü gösterir.
- (C) Kırmızı** segment bir saatten az pil ömrünü gösterir.

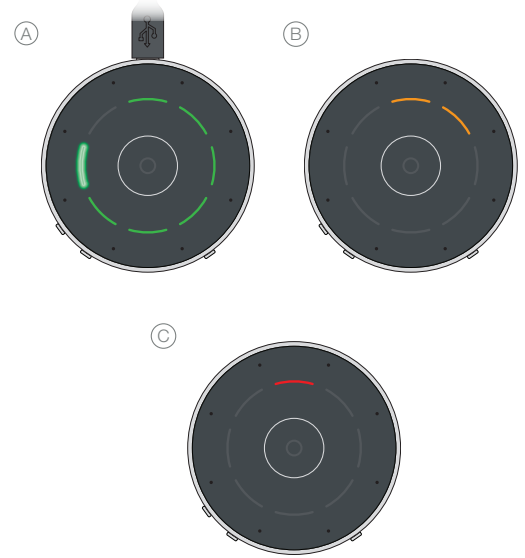

Hat girişi/Hat çıkışı bağlantısı: Üstteki beyaz segmentin yanıp sönmesi hat girişi bağlantısını (örneğin, TV sesi) gösterir. Altındaki beyaz segmentin yanıp sönmesi hat çıkışı bağlantısını (örneğin, kablolu kulaklık) gösterir.